

hotcure

ほっとキュア

一般病室型
易感染患者用病室

患者様のQOL向上を考えたリラックスできる治療空間




落ち着きある柔らかな照明

調光可能なLED照明を内蔵したスクリーン
メッシュ吹出口を採用

木目を基調とした温もりの空間

患者様の居住性を重視したレイアウト設計
およびリラックスできる空間デザイン

導入イメージ

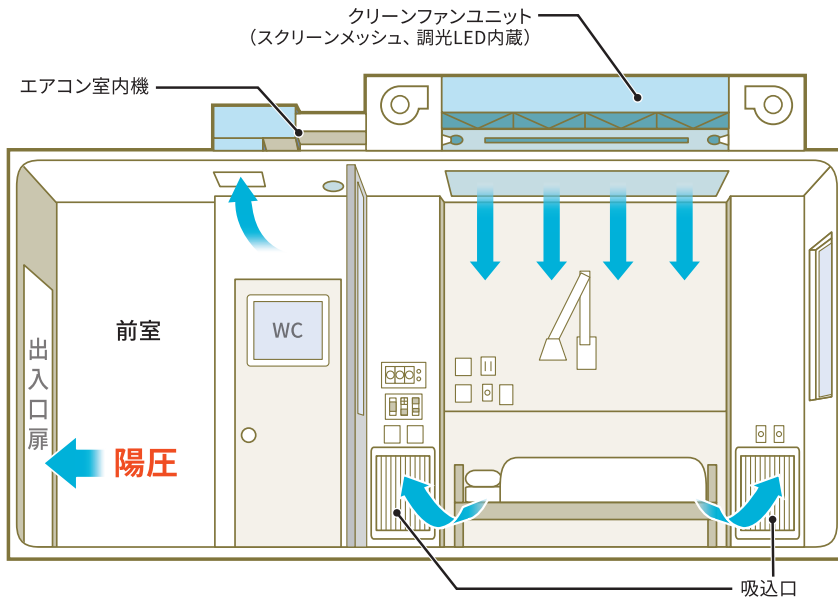

間接照明
による
安らぎある光

ストレスフリーな
居住空間

やわらかな
清浄気流

医療行為はもちろん 清掃のしやすい空間設計

カーテンがなく医療行為を妨げません。埃もたまりにくい設計で床に機器を設置しないため清掃も容易に行うことができます。

「無菌治療室管理加算1」 に対応(施設基準)

垂直層流方式を採用。HEPAフィルタの仕様で菌の再飛散を防止し、ベッド上でISOクラス5、室内はISOクラス6以上の清浄度を維持します。

無菌治療室管理加算1(施設基準)

- ① 自家発電装置を有していること。
- ② 個室であること。
- ③ 滅菌水の供給が常時可能であること。
- ④ 室内の空気清浄度がISOクラス6以上(旧クラス1,000以下)であること。
- ⑤ 空調設備が垂直層流方式、水平層流方式、またはその双方を併用した方式であること。

標準仕様 1床室あたり(約15㎡、WC除く)

清 浄 度	ベッド上	ISOクラス5 (旧クラス100)	内 装	化粧パネル＋木目調シート貼
	室 内	ISOクラス6 (旧クラス1,000)		電気式パッケージエアコン (単独空調)
風 速	通常(弱)	0.15m/s	換 気	陽圧化用給気ファン
	診察(強)	0.25m/s	室 内 照 明	調光式LED照明内蔵スクリーンメッシュ吹出口
騒 音	通常(弱)	45dB (A) 以下	主 な 装 備 品	操作盤 (100Vコンセント2PE2□ (AC/GC) 各機器電源、空調制御)、 読書灯、電動ブラインド、医療ガスアウトレット (O、A、V)、 滅菌水供給装置、他
室内消毒方法	清拭法			
メインフィルタ	HEPAフィルタ 集塵効率99.97%以上 (0.3μm DOP法)			

*記載内容は性能効率等により、仕様を変更する場合があります。

詳しいお問い合わせは、下記へお願いいたします。



セラボヘルスケアサービス株式会社

神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25番22(ライフィノベーションセンター R407)

TEL: 044-276-5611 E-mail: info@cellabhs.co.jp URL: https://www.cellabhs.co.jp/